0031-85-902 02 66

3030 ☐
3031 ☐
3032 ☐
3033 ☐
3034 ☐
3035 ☐
3036 ☐

ERITEK INTERNATIONAL



HANDLEIDING ARM SLIP

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG **AANTREKKEN**



Ga bij een deur staan en vouw het uiteinde van de Slip Arm tot de dichte zijnaad naar binnen



Steek uw arm in de Slip Arm en houd het naar binnen geslagen uiteinde met uw vingers vast



Trek met uw vrije hand de Slip Arm over uw arm tot het naar binnen geslagen uiteinde niet meer verder kan



Trek nu met uw vrije hand uw armkous over de Slip Arm

TIP

Gebruik de Dress-buddy staand en een anti-slip mat bij het aantrekken en uittrekken



Dressbuddy staand
art nr. 2021




Anti-slip mat
art nr. 3040


ZELFSTANDIG **UITTREKKEN**



Uw armkous trekt u verder over uw hand en de lus van de Slip Arm wordt zichtbaar

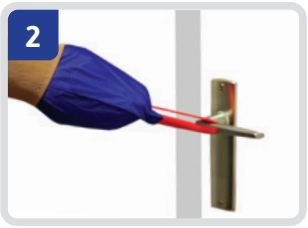

Haak de lus van de Slip Arm aan de haakse hoek van een deurklink

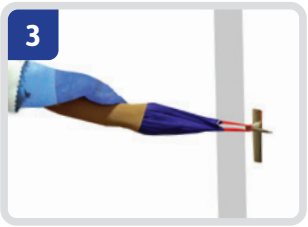

Loop naar achteren om de Slip Arm te verwijderen



De Slip Arm glijdt onder uw armkous vandaan

Om de kous te fixeren kunt u gebruik maken van rubber handschoenen



Handschoenen natuurrubber

art nr.
S 4010
M 4011
L 4012

BESTELLEN?
sales@eritekbv.nl
of 0031-85-902 02 66

ALGEMENE INFORMATIE

WASSEN

Wassen op handwasprogramma, max 30°

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik de Handleiding
- Uitsluitend gebruik door volwassenen

FABRIKANT

Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
sales@eritekbv.nl



"IK BEN WEER ZELFSTANDIG"

Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

CE