0031-85-902 02 66

ERITEK
INTERNATIONAL



HANDLEIDING
DRESSBUDDY EASY + SLIP EASY

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG **AANTREKKEN**

1



Leg de Dressbuddy Easy op uw benen met de gele gripstaafjes omhoog en houd de kous met de hiel naar boven

2



Maak een flinke omslag in de kous

3



Sla de omslag om de gele gripstaafjes (de hiel wijst naar boven)

4



Stop de Slip Easy een klein stukje in de kous met de donkere kant boven

5



Zet de Dressbuddy Easy met de blauwe gripstaafje op het antislip matje en met de gele naar u toe. Duw uw voet in de kous

6



Duw uw hak verder in de kous. Duw de wreef tegen de voorzijde van de kous, zodat er een grotere opening ontstaat

7



Trek de Dressbuddy Easy een beetje omhoog

8



Duw uw kous verder over de voet door met uw hak over het antislip matje te wrijven

9



Trek de Dressbuddy Easy verder omhoog en maak daarna de kous los van de gele gripstaafjes

10



Trek aan de binnenzijde van uw been aan de lichte kant van de Slip Easy om de slip uit de kous te trekken

TIP

Ook handig in gebruik zijn de Slip perfect en de grotere antislipmat



Slip Perfect - art nr. 3014



Anti-slip mat - art nr. 3040

ZELFSTANDIG **UITTREKKEN**

1



Duw de blauwe gripstaafjes zo diep mogelijk in uw kous

2




Duw de Dressbuddy Easy naar beneden tot deze zo ver mogelijk van u af op de grond staat

3



Trek nu uw voet naar achteren

4

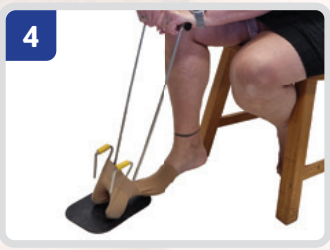

Verplaats de Dressbuddy Easy verder naar voren en trek uw voet verder naar achteren



ONLINE INSTRUCTIEFILM STEUNKOUSEN AAN-EN UITTREKKEN

Mocht het aan- en/of uittrekken niet gelukt zijn, kunt u altijd onze instructies online bekijken. Scan de QR-code en ga aan de slag!

YouTube

ALGEMENE INFORMATIE

WASSEN

Dressbuddy Easy	Mag gereinigd worden tot max 70°
Anti-slip matje	Reinigen in een sopje met afwasmiddel
Slip Easy	Wassen op handwasprogramma, max 30°

VOORDELEN

- Licht in gewicht
- Eenvoudig in gebruik
- Gebruik voor zowel de open als gesloten steunkous

VOORWAARDEN GEBRUIK

- Nog lichte kracht in uw handen
- Uw handen moeten net voorbij uw knie kunnen reiken

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik de Handleiding
- Zittend gebruiken
- Uitsluitend gebruik door volwassenen

FABRIKANT

Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
sales@eritekbv.nl



Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

CE