
0031-85-902 02 66

ERITEK
INTERNATIONAL

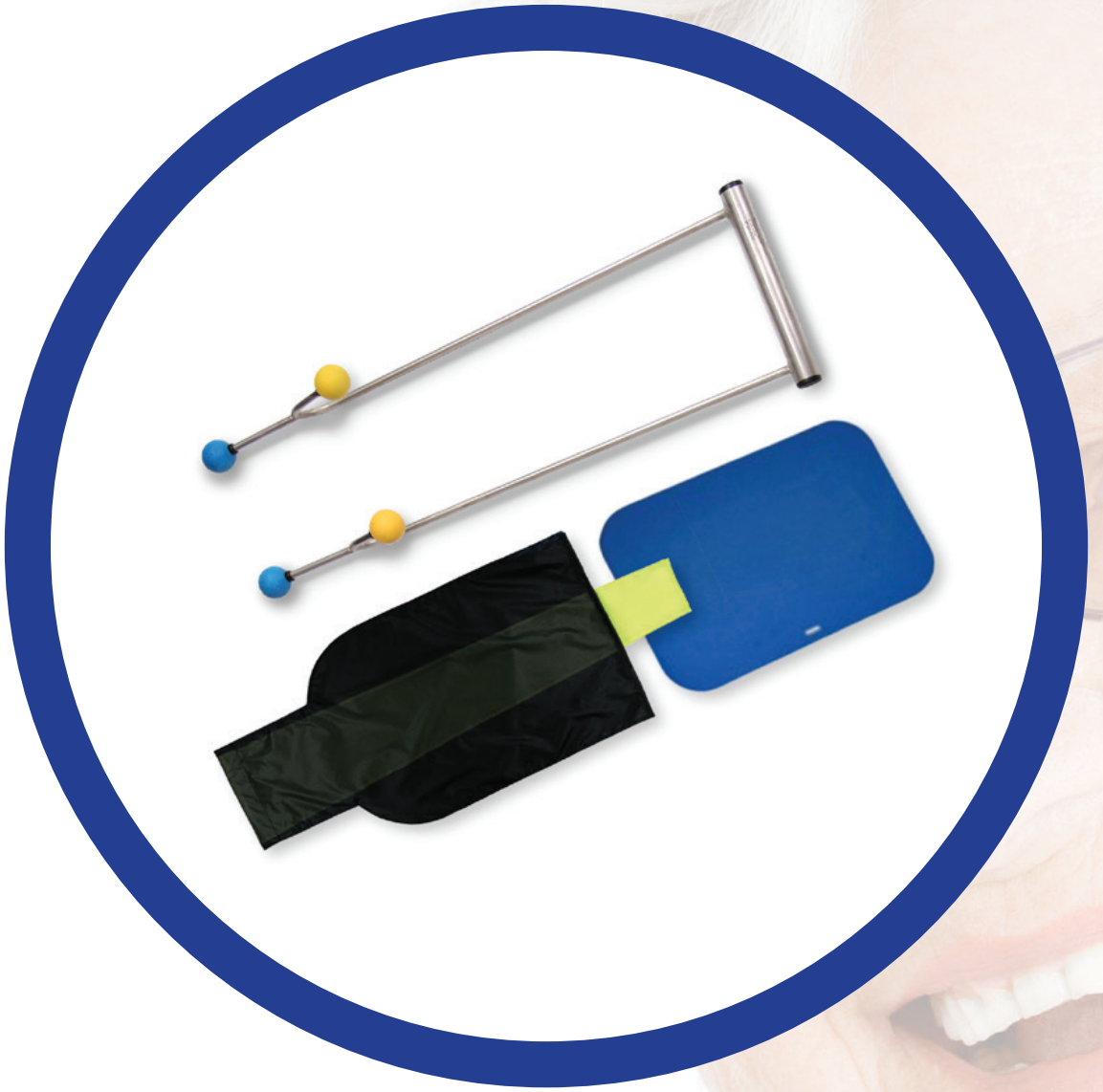

HANDLEIDING
DRESSBUDDY PAKKET + SLIP PERFECT

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG **AANTREKKEN**



Leg de Dressbuddy op uw benen met de gele balletjes omhoog en houd de kous met de hiel naar boven



Maak een flinke omslag in de kous en sla deze om de gele balletjes (hiel wijst naar boven)



Let op dat de kous ver genoeg over de gele balletjes zit



Leg de smalle kant van de slip perfect over de kous op de balletjes



Duw met de vingers de slip een beetje in de kous, zodat de smalle kant dubbel in de kous zit



Duw met de vingers de slip een beetje in de kous, zodat de smalle kant dubbel in de kous zit



Zet de Dressbuddy met de blauwe balletjes op de antislip mat met de gele balletjes naar u toe. Steek uw voet in de kous



Zodra de hiel in de kous zit, strekt u uw onderbeen en trekt u de Dressbuddy omhoog



Schuif uw hak van achter naar voren over de antislip mat tot de kous goed om de voet zit



Trek aan de binnenzijde van uw been aan de gekleurde strook om de slip perfect uit uw kous te halen

TIP

Gebruik speciale handschoenen bij het aantrekken. Met de klem kunnen de gele balletjes dichter bij elkaar, zodat de kous er gemakkelijker op te zetten is.



art nr.
S 4010
M 4011
L 4012

Handschoenen natuurrubber



Klem - art nr. 2999

ZELFSTANDIG **UITTREKKEN**

1



Hang de slip perfect met een ruime omslag aan de gele balletje

2



Zet de Dressbuddy op de antislip mat, stap in de slip perfect en trek de Dressbuddy omhoog

3



Draai de slip perfect tweemaal rond uw been

4



Duw de gedraaide slip perfect een beetje naar beneden

5



Stop de blauwe balletjes zo ver mogelijk naar achteren in de kous (de gele balletjes zijn van u af)

6



Duw de Dressbuddy naar beneden

7



Strek uw onderbeen en duw de Dressbuddy verder van u af

8



Zet de Dressbuddy weer op de antislip mat en trek uw onderbeen naar achteren



ONLINE INSTRUCTIEFILM STEUNKOUSEN AAN-EN UITTREKKEN

Mocht het aan- en/of uittrekken niet gelukt zijn, kunt u altijd onze instructies online bekijken. Scan de QR-code en ga aan de slag!

YouTube

ALGEMENE INFORMATIE

WASSEN

Dressbuddy	Mag gereinigd worden tot max 70°
Antislip matje	Reinigen in een sopje met afwasmiddel
Slip-perfect	Wassen op handwasprogramma, max 30°

VOORDELEN

- Licht in gewicht
- Eenvoudig in gebruik
- Te gebruiken bij steunkousen met open- en gesloten teen

VOORWAARDEN GEBRUIK

- Nog lichte kracht in uw handen
- Uw handen moeten net voorbij uw knie kunnen reiken

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik de Handleiding
- Zittend gebruiken
- Uitsluitend gebruik door volwassenen

FABRIKANT

Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
sales@eritekbv.nl



Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

ERITEK INTERNATIONAL
TOLWEG 2, 5171 PV KAATSHEUVEL
SALES@ERITEKBV.NL
0031-85-902 02 66
(**MA T/M DO** 08:30-16:30 / **VR** 08:30-14:30)
WWW.ERITEK.NL