
0031-85-902 02 66

ERITEK
INTERNATIONAL

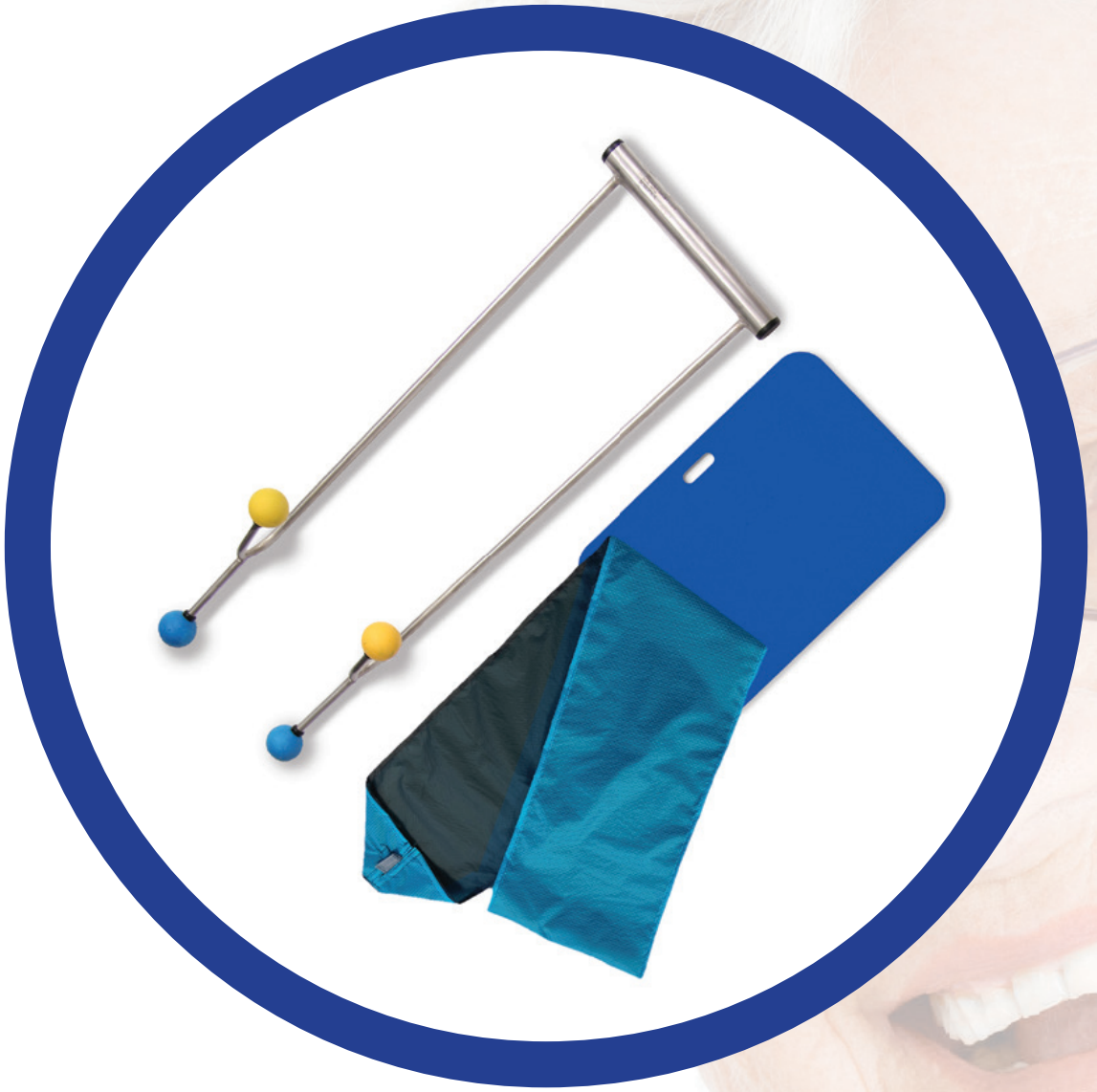

HANDLEIDING
DRESSBUDDY PAKKET + SLIP VOET

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG **AANTREKKEN**

1



Leg de kous in het verlengde van de Dressbuddy op tafel en met de hiel naar boven

2



Sla de kous om de gele balletje van de Dressbuddy heen

3



De bovenrand van de kous zit om de gele balltjes. Stop de driehoek van de slip met de grijze kant boven in de kous

4



Zet de Dresbuddy op het matje, stap in de kous en duw uw voet verder in de kous voorbij de hiel. Lukt dit niet probeer dan de **TIP** hieronder.

5



TIP: Til dan de voet op, draai de Dressbuddy een kwartslag, duw een geel balletje over de hiel en draai weer terug

6



Trek uw kous omhoog en stop met trekken zodra de ovenkant van de kous ter hoogte van de kuit is

7



U kunt nu met de hand de gele balletjes van de Dressbuddy uit de kous halen

8



Duw de hiel van de kous eventueel op zijn plaats door met de onderkant van de voet over het matje te wrijven

9



Trek aan de binnenkant van uw been de slip uit de kous waarbij u de hak op het matje houdt, zodat de kous niet meeschuift

10



U kunt u de kous eventueel nog secuurder rond uw been krijgen met onze rubberen handschoenen.

TIP

Gebruik speciale handschoenen en een anti-slip mat bij het aantrekken en uittrekken



art nr.
S 4010
M 4011
L 4012

Handschoenen
natuurrubber



Anti-slip mat
art nr. 3040

ZELFSTANDIG **UITTREKKEN**

MET SLIPVOET

1 


Sla de slip om het onderbeen

2 

Haal de slip door de lus, trek hem aan en zorg ervoor dat de slip onder de hiel door gaat

3 

Plaat de blauwe balletjes van de Dressbuddy zo dicht mogelijk bij de kuit in de omslag van uw kous

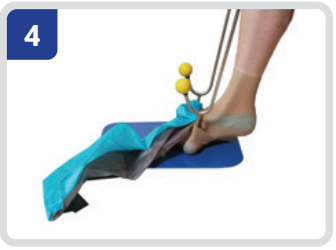4 

Duw de Dressbuddy naar beneden in de richting van de hiel

5 

Trek de voet uit de kous

ZONDER SLIPVOET

1 

Sla de kous ongeveer 10 cm om

2 

Houd het blauwe balletje van de Dressbuddy bij de kous

3 

Zorg dat de bovenrand over het balltje wordt geslagen

4 

Duw de Dressbuddy naar beneden in de richting van de hiel

5 

Trek de voet net boven de grond naar u toe. U kunt ook uw hiel over de mat wrijven zodat de steunkous uit gaat



ONLINE INSTRUCTIEFILM STEUNKOUSEN AAN-EN UITTREKKEN

Mocht het aantrekken niet gelukt zijn kunt u altijd onze instructies online bekijken. Scan de QR-code en ga aan de slag!

YouTube

ALGEMENE INFORMATIE

REINIGEN

Dressbuddy	Mag gereinigd worden tot max 70°
Anti-slip matje	Reinigen in een sopje met afwasmiddel
Slip voet	Wassen op handwasprogramma, max 30°

VOORDELEN

- Licht in gewicht en past in uw reiskoffer
- Eenvoudig in gebruik
- Gebruik voor zowel de open als gesloten steunkous

VOORWAARDEN GEBRUIK

- Nog lichte kracht in uw handen
- Uw handen moeten net over uw kuit kunnen reiken

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik de Handleiding
- Zittend gebruiken
- Uitsluitend gebruik door volwassenen

FABRIKANT

Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
sales@eritekbv.nl



Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

CE

ERITEK INTERNATIONAL

TOLWEG 2, 5171 PV KAATSHEUVEL
SALES@ERITEKBV.NL
0031-85-902 02 66
(**MA T/M DO** 08:30-16:30 / **VR** 08:30-14:30)
WWW.ERITEK.NL