0031-85-902 02 66

ERITEK
INTERNATIONAL



HANDLEIDING
DRESSBUDDY STAAND + SLIP ARM

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG **AANTREKKEN**



Zet de Dressbuddy Staand op het aanrecht



Maak een omslag aan de bovenkant van uw armkous



Sla deze om de blauwe balletjes

Voor de rechterarm de elleboog rechts en voor linker arm de elleboog links



Vouw de Slip Arm naar binnen tot het uiteinde waar de gekleurde lus zit



Steek uw arm in de Slip Arm. Vingers zitten tegen gekleurde lus

TIP

Gebruik speciale handschoenen om de armkous te corrigeren.



art nr.
S 4010
M 4011
L 4012

Handschoenen natuurrubber




Antislip mat - art nr. 3040



Steek uw hand in de armkous



Duw uw arm naar voren in de armkous

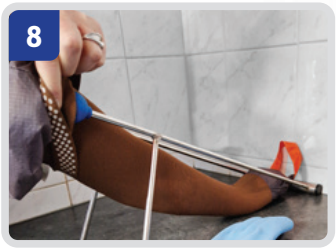


Haal de armkous van de balletje



Corrigeer eventueel nog door met handschoenen over de armkous te wrijven



Doe de lus van de Slip Arm aan de haakse hoek van een deurklink

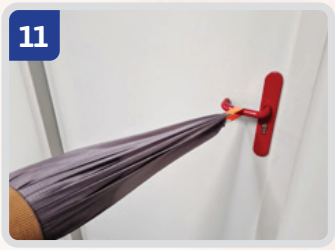

Loop naar achteren en de Slip Arm glijdt onder uw armkous vandaan



ONLINE INSTRUCTIEFILM ARMKOUSEN AANTREKKEN

Mocht het aantrekken niet gelukt zijn, kunt u altijd onze instructies online bekijken. Scan de QR-code en ga aan de slag!

YouTube

ALGEMENE INFORMATIE

WASSEN

Dressbuddy	Mag gereinigd worden tot max 70°
Antislip matje	Reinigen in een sopje met afwasmiddel
Slip Arm	Wassen op handwasprogramma, max 30°

VOORDELEN

- Licht in gewicht
- Eenvoudig in gebruik

VOORWAARDEN GEBRUIK

- Nog lichte kracht in uw handen

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik de Handleiding
- Uitsluitend gebruik door volwassenen

FABRIKANT

Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
sales@eritekbv.nl



Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

CE

ERITEK INTERNATIONAL

TOLWEG 2, 5171 PV KAATSHEUVEL
SALES@ERITEKBV.NL
0031-85-902 02 66
(**MA T/M DO** 08:30-16:30 / **VR** 08:30-14:30)
WWW.ERITEK.NL