Gebruikershandleiding
Ort.O.Mate

De Ort.O.Mate is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het zelfstandig elektrisch uittrekken van **Therapeutisch Elastische Kousen**

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door
vóór montage en ingebruikname



Tel.: 085-9020266
E-mail: sales@eritekbv.nl

ERITEK INTERNATIONAL

Algemeen

De Ort.O.Mate bestaat uit:

Behuizing (1) waaruit een **band (2)** kan worden getrokken


Aan de band zit een **beugel met twee balletjes (3),** die aan de bovenzijde in de kous gestopt wordt

Door middel van de **kabel (4)**, die tussen de afstandsbediening en de beugel is bevestigd, kunt u de beugel, zittend op een stoel naar u toetrekken

Met de startknop op de **afstandsbediening (5)** wordt de Ort.O.Mate ingeschakeld

De **zekering** en **stroomkabel (6)** vind u aan de rechterzijkant van de Ort.O.Mate

Reserve batterij en zekering zijn meegeleverd in de doos.
Indien al gebruikt: u kunt ook een nieuwe batterij kopen (Duracell heeft onze voorkeur).
Een nieuwe zekering kunt u bij ons bestellen via de mail (sales@eritekbv.nl) of via ons telefoonnummer: 085-902 02 66

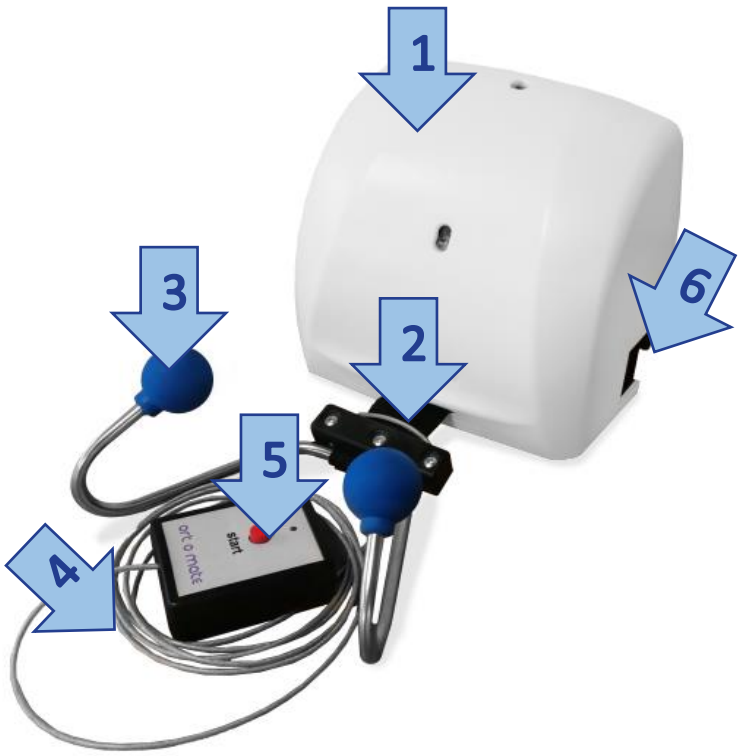

De Ort.O.Mate is een uitermate gebruiksvriendelijk hulpmiddel, inzetbaar voor het uittrekken van alle **Therapeutisch Elastische Kousen**

ERITEK INTERNATIONAL

Montage instructie

- Voor een veilig gebruik van uw Ort.O.Mate moet het apparaat degelijk aan de muur bevestigd worden net boven de vloerplint. Gebruik hiervoor de bijgeleverde montagematerialen. In deze gebruikershandleiding vindt u ook een papieren mal voor het boren van de gaten


- Uw Ort.O.Mate dient gemonteerd te worden op een stevige wand waar een stopcontact, bij voorkeur met randaarde, in de omgeving aanwezig is. Het snoer is 3 m lang. Wanneer er alleen een holle wand beschikbaar is voor montage van de Ort.O.Mate, dient u holle wandpluggen te gebruiken

- Uw Ort.O.Mate dient gemonteerd te worden waar u ruimte heeft om een stevige stoel te plaatsen op een afstand van 2 meter voor het apparaat

- Monteer uw Ort.O.Mate daar waar deze niet in de weg hangt, zodat er geen hinder of gevaar kan ontstaan

- Monteer uw Ort.O.Mate niet in een doorgang, achter een deur of in de nabijheid van directe en/of indirecte warmtebronnen

- Houdt het apparaat en de afstandsbediening droog. Monteer uw Ort.O.Mate zodanig, dat deze niet blootgesteld kan worden aan spatwater, zoals in uw badkamer, een andere vochtige ruimte of onder een raam waar inregenen mogelijk is

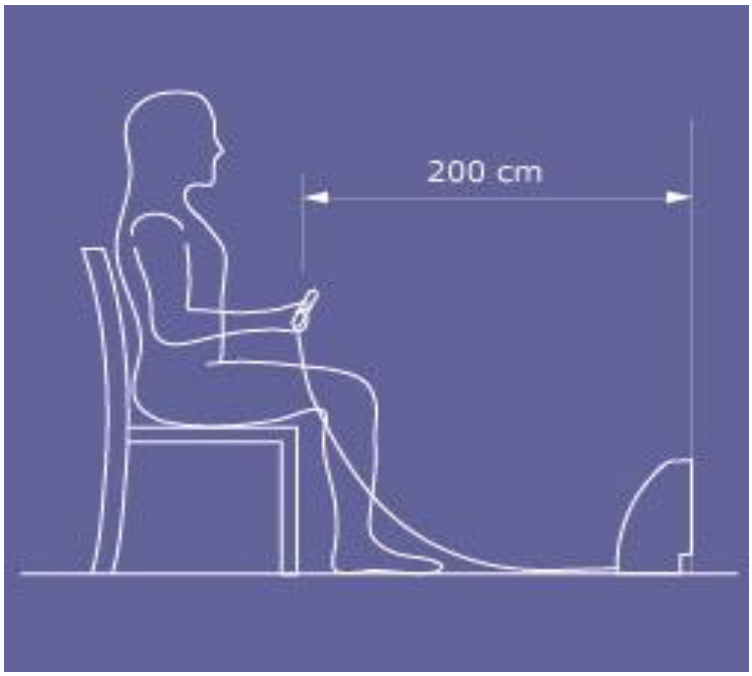

ERITEK INTERNATIONAL


Montage



1. Aan de achterzijde van de Ort.O.Mate zit een achterplaat



4. Schuif nu de achterplaat naar boven. Lukt dit niet, tik zachtjes op de bovenrand met een schroevendraaier en hamer en schuif opnieuw de plaat naar boven

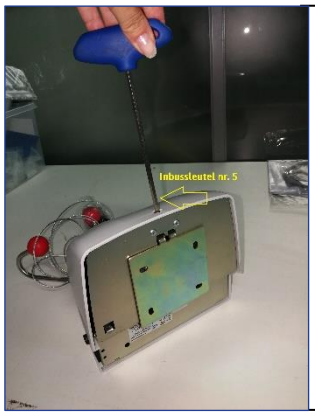

2. Deze haalt u eraf door de inbusbout aan de bovenzijde van de Ort.O.Mate los te draaien met een inbussleutel nr. 5. Deze is niet meegeleverd



5. De achterplaat is nu los en deze monteert u op de muur met de meegeleverde pluggen en bouten. Gebruik voor het boren de mal in deze handleiding



3. De achterplaat hangt nu los in het frame van de Ort.O.Mate



6. De Ort.O.Mate hangt u nu op de achterplaat. Houd deze boven de achterplaat en laat hem zakken. Zet vast met de inbusbout bovenop de Ort.O.Mate

- Stop de 3-polige stekker in de rechterzijde van de Ort.O.Mate en daarna de andere stekker in het stopcontact met bij voorkeur randaarde
- De Ort.O.Mate is nu klaar voor gebruik

ERITEK INTERNATIONAL

Ingebruikname

- De gebruiker dient de gebruikershandleiding goed te lezen en te begrijpen alvorens de Ort.O.Mate zelfstandig en zonder toezicht gebruikt gaat worden
- U heeft de netspanningskabel met de 3-polige stekker in de Ort.O.Mate gedaan en daarna de stekker in het stopcontact, bij voorkeur met randaarde
- In de **afstandsbediening (5)** zit een 9V-batterij. Deze moet minimaal één keer per jaar vervangen worden. Onze voorkeur is Duracell.
  Lever lege en/of defecte batterijen in als klein chemisch afval (KCA)
- Uw Ort.O.Mate kan permanent op het elektriciteitsnet aangesloten blijven
- Reinig Uw Ort.O.Mate alleen met een zachte vochtige doek
- Raadpleeg bij storing eerst de actiepunten achterin deze handleiding
- Reparaties dienen enkel en alleen te worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel
- De Ort.O.Mate is ontwikkeld voor persoonlijk gebruik
- De Ort.O.Mate is een hulpmiddel dat enkel en alleen moet worden gebruikt voor het uittrekken van Therapeutisch Elastische Kousen en Panty's
- De Ort.O.Mate is in de fabriek ingesteld op het uittrekken van elk type compressiekous

Bekijk deze YouTube link voor het oefenen met de Ort.O.Mate:

https://youtu.be/xUDKYf1QS38?si=tmFpC8dui917_hgq

ERITEK INTERNATIONAL

Het Gebruik

Het gebruik van uw Ort.O.Mate verloopt in een aantal stappen:

1. Plaats uw stoel recht tegenover de Ort.O.Mate op een afstand van 2 meter op een niet-gladde ondergrond
2. Gebruik alleen een stevige stoel, bij voorkeur één met armleuningen
3. Indien een gebruiker bang is om van de stoel af te glijden, is een antislip matje voor op de zitting een goed hulpmiddel
4. Pak de **afstandsbediening (5)** en neem plaats op uw stoel
   Trek dan met de **kabel (4)** de band uit de **behuizing (1)**
5. Stop de **beugel (3)** met de balletjes naar beneden in uw kous op de volgende manier: Sla de bovenkant van de kous +/- 10 cm om. Houdt het beugeltje met de balletjes naar beneden achter het onderbeen tegen de kous. Sla nu de omgevouwen rand van de kous terug om de balletjes. Bij een lieskous sla je deze eerst om tot onder de knie
6. Leg de **afstandsbediening (5)** op de knie waarvan u de kous niet uittrekt, richt op de sensor (het ovale oog op de **behuizing (1)**), druk op de startknop en houd deze ingedrukt
7. Als u het apparaat in werking zet, houdt dan de voet met een gestrekt onderbeen ongeveer 30 cm omhoog
8. Strek het onderbeen tijdens het afstropen van de kous en richt uw tenen naar het apparaat, zodat de voet zo vlak mogelijk is. De band gaat achter uw been en onder uw hiel naar het apparaat
9. Als de kous van uw been is afgestroopt kunt u de startknop loslaten. Het apparaat stopt dan met trekken
10. Om het beugeltje met de uitgetrokken kous weer naar u toe te halen, kunt u gewoon blijven zitten en trekt u aan de kabel van de afstandsbediening. Zo haalt u de kous naar u toe
11. Wanneer u een tweede kous wilt uittrekken, kunt u de stappen 4 t/m 6 herhalen
12. Na gebruik dient de band weer te worden ingerold door op de startknop te drukken en stopt u wanneer de beugel ongeveer 5 cm voor het apparaat is

Tijdens het uittrekken van de kous, kunt u het inrollen van de band onderbreken door de startknop los te laten.
Doorgaan met inrollen kan door de startknop weer in te drukken.

ERITEK INTERNATIONAL

Gebruik van de Ort.O.Mate



1. De Ort.O.Mate. Plaats uw stoel recht tegenover het apparaat op 2 meter afstand



5. Leg de afstandsbediening op de knie waarvan u de kous niet uittrekt



2. Sla de bovenkant van de kous +/- 10 cm om



6. Houdt uw been gestrekt en til uw voet op tot ongeveer 30 cm. boven de grond



3. Houdt het beugeltje met de balletjes naar beneden achter het onderbeen tegen de kous



7. Druk op start en houdt het onderbeen gestrekt



4. Sla de omgevouwen rand van de kous om de balletjes



8. Als de kous met de beugel bij de hiel is, strek dan uw voet zodat uw tenen naar het apparaat wijzen

Op bovenstaande manier glijden de balletjes langs uw huid.
Wanneer u een gevoelige huid heeft of dit niet prettig vindt, maakt u eerst een ‘bruggetje’ in uw kous op de volgende manier:

- Sla de bovenkant van de kous zover mogelijk naar beneden
- Sla deze nu terug naar boven tot de vouw
- U heeft nu een ‘bruggetje’
- Stop de balletjes aan achterzijde van uw onderbeen in dit ‘bruggetje’
- Zorg dat de balletjes recht naast elkaar zitten
- Ga verder bij punt 5

Door het maken van een ‘bruggetje’ heeft u ook niet meer zoveel spanning op de kousenband met antislip, waardoor het makkelijker is de balletjes in het ‘bruggetje’ te stoppen.

ERITEK INTERNATIONAL

Gebruikers-tips

- Het kan voorkomen dat bij het uitdoen van een kous met een **lange lengterek** het uittrekken moeilijk gaat. Ook hiervoor neemt u contact op met Eritek B.V.

- De gebruiker moet stabiel zitten en u moet de balletjes van de beugel goed achter in de kous kunnen stoppen.

- Wanneer u de beugel niet in de kous kunt krijgen door beperkte handfunctie of wanneer u niet met de handen onder de knie kunt komen, neemt u contact op met Eritek B.V. voor eventuele andere mogelijkheden.

- De gebruiker dient het been ongeveer 30 cm op te kunnen tillen en de voet te kunnen strekken tijdens het afrollen van de kous. Wanneer dit niet lukt, neemt u contact op met Eritek voor een oplossing.

- De gebruiker bedient zelf de afstandsbediening.
  Vanuit de afstandsbediening wordt d.m.v. het indrukken van de startknop een infrarood signaal naar het apparaat gezonden. Dit word gezonden naar de sensor (het ovale oog) in het midden van de **behuizing (1).** Als de afstandsbediening niet goed stil gehouden wordt of niet meer naar de sensor wordt gericht, zal dit signaal worden verbroken en stopt het uittrekproces. Leg de afstandsbediening daarom altijd stil voorop de knie waarvan u de kous niet uittrekt.

- **Indien u een kous draagt tot de lies (een AG kous):**
  Trek deze hetzelfde uit als een kous tot de knie (een AD kous), door de kous eerst naar beneden te trekken tot onder de knie
- **Als u de kous niet uitgetrokken krijgt, en/of deze blijft hangen net voor de hiel:**
  U kunt ons altijd bellen voor tips, meestal hebben wij een oplossing om u te helpen

Wanneer u tijdens het oefenen problemen ondervindt, kunt u met ons videobellen. Of dit filmen met uw mobiele telefoon en dit filmpje naar ons opsturen. Wij zullen dan uw filmpje bekijken en u helpen tijdens het oefentraject om er voor te zorgen dat u op de juiste manier de Ort.O.Mate kunt gaan gebruiken.
Ons WhatsApp ondersteuningsnummer is: 06-50 64 55 29

ERITEK INTERNATIONAL

Plaatsen van batterij

De afstandsbediening:



Verwijder het klepje aan de achterzijde van de afstandsbediening. Dit doe je door het klepje naar beneden te schuiven



Plaats de batterij (bij voorkeur Duracell) in de afstandsbediening. Let er goed op dat de + en de – van de batterij op de juiste plaats komen



Sluit het klepje weer over de batterij.

De afstandsbediening is nu klaar voor gebruik

Vervangen van zekering



Aan de rechterkant van de Ort.O.Mate zit een zwart, rond dopje. Deze induwen en een kwartslag naar u toe draaien, zodat u de zekering eruit kunt halen



Controleer of de zekering vervangen dient te worden. De nieuwe zekering in tegengestelde werkwijze terug plaatsen

Defecte zekeringen:



Nieuwe zekering:



ERITEK INTERNATIONAL

Actie bij storing

1. Hapert de Ort.O.Mate of doet de Ort.O.Mate helemaal niets?
   De Ort.O.Mate doet niets = **ga naar stap 2**.
   De Ort.O.Mate hapert = legt u de afstandsbediening stil op de knie van het been waarvan u de kous NIET uittrekt?
   Nee = Leg de afstandsbediening stil op de knie van het been waarvan u de kous NIET uittrekt tijdens het uittrekken van uw kousen en richt op het ovale oog op de behuizing.
   Hapert de Ort.O.Mate nog?
   Ja = blokkeert er iets het signaal van de afstandsbediening naar het grijze kastje aan de muur? (er gaat een infrarood signaal van de afstandsbediening naar het ovale oog op de behuizing). Hapert de Ort.O.Mate nu nog, neem dan contact op met Eritek B.V.

2. Zit de stekker (stroomkabel) van de Ort.O.Mate goed in het apparaat?
   Zit deze ook goed in het stopcontact? Staat er stroom op het stopcontact? (check dit met een ander elektrisch apparaat zoals een telefoonoplader of een lamp)
   Ja = Ga naar stap 3
   Nee = Steek de stekker goed in de Ort.O.Mate en in het stopcontact en zorg voor goede stroomtoevoer. Werkt de Ort.O.Mate nog niet, ga naar stap 3

3. Het kan ook zijn dat de batterij te weinig vermogen heeft voor het aansturen van de Ort.O.Mate en wel genoeg vermogen heeft om het rode lampje te laten branden.
   U dient dan ook de batterij (bij voorkeur Duracell) altijd te vervangen. (zie batterij instructie)
   Brandt het lampje nog steeds niet na vervanging van de batterij, neem dan contact op met Eritek B.V.

4. Controleer of de zekering defect is. Deze bevind zich aan de rechterkant van de Ort.O.Mate in het zwarte, ronde dopje (zie instructie). Controleer of deze defect is. (brandvlekje in het glazen buisje, gesprongen zilverdraadje of helemaal geen draadje zichtbaar = defect)
   Is de zekering defect?
   Ja = vervang de zekering
   Nee = Plaats de zekering terug en neem contact op met Eritek B.V.
   Is de zekering vervangen en doet de Ort.O.Mate het nog steeds niet, neem dan contact op met Eritek.

* Is de **band** van de Ort.O.Mate **dubbel geslagen**? Trek de band er uit en strijk de vouw uit de band door er een vochtige doek op te leggen en deze doek dan te strijken.

Zit de **band vast** in het apparaat? Trek de band er weer uit (indien nodig met een stevig rukje) terwijl u de beugel heen en weer beweegt.

Speciale aanpassingen

Draagt u een hoge drukklasse TEK:

- De Ort.O.Mate is aanpasbaar voor speciale omstandigheden. Voor bijvoorbeeld een TEK met een hogere drukklasse. Is dit voor u van toepassing, neem dan contact op met Eritek B.V.

Draagt u een steunpanty:

- Voor het uittrekken van een steunpanty bevestigen we twee beugeltjes aan de band met een verschil van ongeveer 20 cm. Zie foto. Neem contact op met Eritek B.V. om dit kenbaar te maken.



Aanpassing voor het uittrekken van een elastische steunpanty



Aanpassing voor mensen die een been niet kunnen sturen of optillen of er helemaal geen gevoel in hebben

FABRIKANT: Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
Nederland
sales@eritekbv.nl

CONTACTGEGEVENS ERITEK B.V.:

- Postadres: Tolweg 2 5171 PV Kaatsheuvel
- Telefoon: 085 – 902 02 66
- E-mail: sales@eritekbv.nl
- Openingstijden: Maandag t/m Donderdag 08:30 uur tot 16:30 uur
  Vrijdag 08:30 uur tot 14:30 uur

Bij gebruik, anders dan in de handleiding vermeld, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen

ERITEK INTERNATIONAL

VEILIGHEIDSINFORMATIE

WAARSCHUWING: <u>Lees voor gebruik de handleiding en veiligheidsinformatie</u>

De handleiding is bedoeld om u te helpen vertrouwd te raken met de Ort O Mate. Volgt u de instructies voor de juiste montage, het correcte gebruik en onderhoud van het apparaat met het oog op veiligheid en maximale effectiviteit.



WAARSCHUWING: Houd buiten het bereik van kleine kinderen

De Ort O Mate en de bijbehorende accessoires zijn geen speelgoed. Laat kleine kinderen hier niet mee spelen omdat kinderen zichzelf of anderen kunnen verwonden of schade kunnen toebrengen aan uw apparaat. De Ort O Mate bevat mogelijk kleine onderdelen waarin kinderen die jonger zijn dan 3 jaar kunnen stikken. Houd het apparaat en alle onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

WAARSCHUWING: Veilig gebruik

Gebruik de Ort O Mate uitsluitend zittend. In een stabiele positie, zonder gevaar voor wegglijden. Het gebruik van elektronische apparaten kan letsel met zich meebrengen. U kunt last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek, rug, heupen, knieën, enkels of andere delen van uw bewegingsapparaat. Als u echter symptomen ervaart, zoals ongemak, (acute) pijn, tintelingen, gevoelloosheid, een brandend gevoel of stijfheid, die blijvend zijn of steeds terugkeren, MAG U DEZE WAARSCHUWINGSSIGNALEN NIET NEGEREN. RAADPLEEG EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER.

WAARSCHUWING: Juiste montage aan de wand

- Volg alle instructies van de fabrikant voor de wandbevestiging.
- Gebruik meegeleverde materialen en montagesysteem voor de Ort O Mate.
- Zorg ervoor dat alle schroeven goed zijn aangedraaid volgens de instructies van de fabrikant van de wandbevestiging.
- Uw apparaat is ontworpen voor installatie op een betonnen muur. Er kan aanvullende versterking nodig zijn voor wanden van gipsplaat, gips, kunststof platen, staal en hout en/of holle wandpluggen voordat de installatie begint.
- Gebruik de Ort O Mate pas als u zeker weet dat het volledig is bevestigd volgens de instructies die zijn opgegeven bij de geselecteerde montageoplossing.

WAARSCHUWING: Veiligheid van kabels/snoeren en netvoeding

Blootliggende apparaat kabels en -snoeren vormen een potentieel struikelgevaar. Plaats alle kabels en snoeren zodanig dat mensen of huisdieren hier niet over kunnen struikelen en er niet per ongeluk achter kunnen blijven haken terwijl ze rondlopen of door een bepaalde ruimte lopen.

Sta niet toe dat kinderen met de kabels en snoeren spelen. Voorkom als volgt schade aan de snoeren en kabels:

- Voorkom dat netsnoeren beschadigd raken doordat erop wordt getrapt.
- Zorg ervoor dat netsnoeren niet vastgeklemd zitten of sterk worden gebogen/uitgetrokken, vooral op de plaatsen waar ze op een stopcontact, de stroomvoorziening en uw apparaat zijn aangesloten.
- Stel netsnoeren niet bloot aan warmtebronnen.
- Voorkom dat huisdieren of kinderen in netsnoeren bijten of hierop kauwen.
- Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u het netsnoer uit het stopcontact wilt halen.
- Inspecteer uw netsnoeren regelmatig. Als een netsnoer of kabel warm wordt, rafelt, barst of op een of andere manier beschadigd raakt, mag u deze per direct niet meer gebruiken. We adviseren u het beschadigde netsnoer te vervangen door een origineel vervangend netsnoer van Independent Special Products BV.
- Koppel uw apparaat los tijdens onweer of wanneer u het gedurende lange tijd niet gebruikt.
- We adviseren het originele, meegeleverde netsnoer te gebruiken.
- Maak alleen gebruik van netvoeding uit een standaardstopcontact bij voorkeur met randaarde.
- Zorg ervoor dat u het stopcontact, het verlengsnoer, de stekkerdoos of een andere voedingsbron niet overbelast. Controleer of de voedingsbron de stroomsterkte aankan die uw apparaat en eventuele andere apparaten in dezelfde groep gebruiken (zoals wordt aangegeven op de voedingseenheid).

WAARSCHUWING: Veiligheid van batterij

De Ort O Mate afstandsbediening maakt gebruik van een meegeleverde wegwerp batterij. Onjuist gebruik of misbruik van wegwerp batterijen kan leiden tot letsel, materiële schade en kan uw apparaat of de bijbehorende accessoires beschadigen als gevolg van lekkende batterijvloeistoffen, brand, oververhitting of explosie.

Batterijvloeistof is bijtend en mogelijk giftig. Het kan brandwonden veroorzaken en is mogelijk schadelijk of dodelijk bij het inslikken.

U kunt als volgt het risico op letsel bij gebruik van wegwerp batterijen verminderen:

- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
- Verwijder oude, zwakke of versleten batterijen onmiddellijk uit uw apparaat. Recycle oude, zwakke of versleten batterijen in overeenstemming met lokale, regionale of nationale wet- of regelgeving.
- Verwijder de batterij uit uw apparaat wanneer u het voor een langere periode niet gebruikt.
- Vermijd contact met batterijvloeistof. Als een batterij lekt:
    - voorkom dat de gelekte vloeistof in contact komt met huid, ogen, kleding of andere oppervlakken. Als de batterijvloeistof in contact komt met huid, ogen of kleding, was onmiddellijk het betrokken gebied met water en neem contact op met uw huisarts of andere medische zorgverlener voor zover van toepassing.
    - Verwijder zorgvuldig de batterij door de installatie-instructies voor batterijen die met uw Ort O Mate zijn meegeleverd in omgekeerde volgorde uit te voeren.
    - Maak, voordat u nieuwe batterijen plaatst, het batterij vak grondig schoon met een droge doek of volg de aanbevelingen van de fabrikant voor reiniging.
- We raden aan door Independent Special Products goedgekeurde batterijen te gebruiken. Vervang de batterij die is meegeleverd met de Ort O Mate door batterijen van hetzelfde type en dezelfde classificatie.
- Niet demonteren, verpletteren. Batterijen mogen niet worden geplet, doorgeprikt of versnipperd, externe contacten of circuits mogen niet worden kortgesloten en batterijen mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen boven 40 °C of in vuur worden gegooid.
- Laat geen metalen voorwerpen de batterijklemmen van het apparaat aanraken; deze kunnen heet worden en brandwonden veroorzaken.
- Stel een apparaat met batterijvoeding niet gedurende langere tijd bloot aan direct zonlicht.
- Dompel batterijen niet onder in water en zorg ervoor dat deze niet nat worden.
- Maak geen gebruik van een batterij die nat is geworden. Probeer niet een batterij of batterij te drogen met een haardroger, in een oven of in een magnetron.
- Stel batterijen niet bloot aan zware fysieke schokken, sla er niet op, gooi er niet mee en trap er niet op.

- Als u uw apparaat of de batterij laat vallen, vooral op een hard oppervlak, kunnen het apparaat en de batterij beschadigd raken. We adviseren u contact op te nemen met Independent Special Products als u denkt dat het apparaat beschadigd is.
- Gebruik nooit een beschadigde batterij. Als de batterij krassen of deuken bevat, legt u deze onmiddellijk terzijde en voert u deze op passende wijze af. Het gebruik van een beschadigde batterij kan tot elektrische kortsluiting, oververhitting en andere componentstoringen leiden.



WAARSCHUWING: Radiofrequentiestoringen

Radiofrequentie-emissies en magneetvelden van elektronische apparaten kunnen een negatieve invloed hebben op de werking van andere elektronische apparatuur. Hoewel uw Ort O Mate is ontworpen, getest en geproduceerd om te voldoen aan de regelgeving met betrekking tot radiofrequentie-emissie in landen zoals de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie en Japan, kunnen de draadloze zenders en elektrische circuits in het apparaat toch zorgen voor onopzettelijke interferentie in andere elektronische apparatuur.

Personen met pacemakers moeten altijd de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

- de American Heart Association (Amerikaanse hartstichting) raadt aan om een afstand van minimaal 15 cm aan te houden tussen een draadloos apparaat en een pacemaker om te voorkomen dat er een storing optreedt in de pacemaker.

Als u een ander (medisch) apparaat gebruikt, raadpleeg de fabrikant van het andere apparaat (of uw arts) voor informatie en instructies over het gebruik van elektronische apparaten in de buurt van uw andere (medische) apparaat. Als u vermoedt dat er interferentie plaatsvindt, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit.