0031-85-902 02 66

ERITEK INTERNATIONAL



HANDLEIDING SLIP VOET BREED

STEUNKOUSEN AAN- EN UITDOEN? DAT DOE IK ZELF!

ZELFSTANDIG **AANTREKKEN**



Steek uw voet in de punt van de slip




Trek uw kous over de voet aan, waarbij de slip onder de voet blijft



Trek uw kous helemaal aan over uw been, waarbij de slip langs de kuit blijft



Pak nu de buitenste (blauwe) slip vast aan de binnenkant van uw been

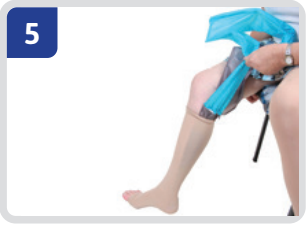

Trek nu de buitenste slip uit de kous en verdeel de kous verder over uw been

TIP

Gebruik speciale handschoenen en een anti-slip mat bij het aantrekken en uittrekken



Handschoenen natuurrubber

art nr.
S 4010
M 4011
L 4012



Anti-slip mat
art nr. 3040

ZELFSTANDIG **UITTREKKEN**



Sla de slip om het onderbeen



Haal de slip door de lus en trek hem aan, waarbij de slip onder de hiel komt



Sla de kous over de slip naar beneden en trek de kous verder uit



Trek de kous over de hiel uit, waarbij de slip in de kous blijft zitten



Trek de kous helemaal uit

Let op! Trek alleen aan de kous

KUNT U NIET MEER BIJ UW VOETEN?

Wij bieden ook onderstaande producten aan voor het aan-en uittrekken van steunkousen



Dressbuddy aan/uit
art nr. 2001



Ort.O.Mate
art nr. 3070

BESTELLEN?

sales@eritekbv.nl
of 0031-85-902 02 66

ALGEMENE INFORMATIE

WASSEN

Wassen op handwasprogramma, max 30°

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- Lees voor gebruik de Handleiding
- Zittend gebruiken
- Uitsluitend gebruik door volwassenen

FABRIKANT

Independent Special Products BV
Tolweg 2
5171 PV Kaatsheuvel
sales@eritekbv.nl



"IK BEN WEER ZELFSTANDIG"

Vraag uw kousenleverancier naar de mogelijkheden:

Plak hier uw adressticker

CE

ERITEK INTERNATIONAL

TOLWEG 2, 5171 PV KAATSHEUVEL
SALES@ERITEKBV.NL
0031-85-902 02 66
(MA T/M DO 08:30-16:30 / VR 08:30-14:30)
WWW.ERITEK.NL